

# Fabcio

## ClearUp

Gözenek Temizleme Cihazı



KULLANIM KILAVUZU  
ve GARANTİ BELGESİ

FBC988

CE

# Giriş

Fabcio ClearUp dünyasına hoş geldiniz!

Vakum negatif basınç teknolojisiyle ciltteki yağ, kir ve makyaj kalıntılarını hızlı bir şekilde temizleyen, ölü deriyi uzaklaştıran ve gözenekleri derinlemesine temizleyen çok işlevli bir güzellik cihazıdır. Bu cihaz, siyah nokta, gözenek ve yağ temizliğinde etkili bir çözümdür.

## Önemli Bilgiler


Cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatlice okuyun. Kılavuzda verilen talimatlara uyulmaması veya bu kılavuzda belirtilenler dışında kullanılması kendinize zarar vermenize veya ürünün hasar görmesine neden olabilir. Ayrıca, okuduktan sonra, başkalarının kolayca görebileceği bir yerde saklayınız.

## Güvenlik Önlemleri

1. Bu ürün su geçirmez değildir. Kullanırken kuru tutun.
2. Cihazı kullanırken aşındırıcı ürünler veya sert kimyasal maddeler kullanmayın.
3. Kuru ciltler için haftada 1 kez, yağlı ve karma ciltler için haftada 2 kez kullanılması önerilir. Her kullanım süresi 5 dakikayı geçmemelidir.
4. Vakum başlığını cilt üzerinde fazla bastırmayın, aksi halde ciltte güçlü bir çekiş etkisi oluşturabilir.
5. Aynı bölgede tekrarlı kullanım yapmayın, aksi halde kızarıklık oluşabilir. Bu durumda, cildin iyileşmesini bekleyin.
6. Kullanım sonrası ciltte kızarıklık olabilir. Bu, normal bir durumdur ve genellikle 30 dakika içinde kaybolur.
7. Ürün, kozmetik operasyon sonrası veya hassas ciltler üzerinde kullanılmamalıdır. Hamileler, kalp hastaları ve çocuklar dikkatli olmalıdır.

## Cihaz Parçaları

1. Vakum Başlıkları: Farklı cilt ihtiyaçlarına göre deęiřtirilebilir.
2. LED Göstergesi: řarj ve güç durumunu gösterir.
3. Güç Düğmesi: Cihazı açar/kapatır ve modlar arasında geçiř yapar.
4. řarj Giriři: USB Type-C baęlantısı.

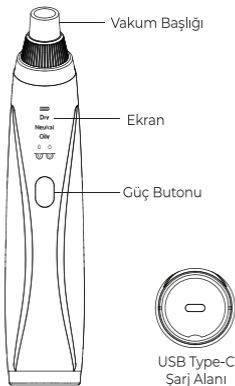

# Şarj Talimatları

## Şarj Durumu

- Batarya seviyesi düşük olduğunda, pil simgesi yanıp sönerek şarj etmeniz gerektiğini hatırlatır.
- 5V/1A voltajına sahip bir güç kaynağı ve Type-C şarj kablosuyla şarj edin.
- Şarj sırasında pil simgesi yanıp söner, tam dolduğunda ise sabit yanar.

## Notlar

- Ürün tam olarak üç buçuk saat içinde şarj olur. Bu süre boyunca cihazın kullanılmasına izin verilmez.
- Şarj tamamlandıktan sonra cihazı güç kaynağından çıkarın.

# Kullanım Talimatları

## Hazırlık



- Kullanımdan önce yüzünüzü temizleyin ve sıcak bir kompres veya buhar banyosu ile gözenekleri açın. Bu, siyah nokta temizliğinde daha iyi sonuçlar almanızı sağlar. Losyonu pamuk yardımıyla siyah noktalara sürün, 10-15 dakika sıcak su ile püskürtün, sonra çıkarın.

**İpucu:** Gözenekler kapalı olduğunda, siyah noktaların çıkarılması zorlaşabilir.

## Cihazı Çalıştırın



- Güç düğmesine 2 saniye basarak cihazı açın. İlk modda başlar.
- Ayarlar arasında geçiş yapmak için düğmeye kısa basın.
- Sıcak kompres modu için düğmeye iki kez

basın, yaklaşık 45°C ısı üretir. 10 dakika sonra cihaz otomatik olarak kapanır (koruma modu).

## Siyah Nokta Temizliği

---



• Öncelikle cihazın emiş gücünü elinizde test edin. Cilt tipinize uygun başlığı ve emiş gücünü seçin. Çalışma modunu öğrenin, ardından yüzünüzde uygulayın.



• Yavaşça siyah nokta bulunan bölgelerde cihazı hareket ettirin. Aynı noktada uzun süre beklemeyin, aksi halde ciltte kızarıklık veya morarma olabilir.

## Son Adım

---



• Kullanım sonrası, gözenek sıkılaştırıcı bir losyon veya tonik uygulayın. Cildinizde tamamen emilene kadar hafifçe kullanın.

## Ürün Özellikleri Ve Başlık Türleri

---



### Masaj Başlığı (Büyük Emiş Gücü)

• Ölü deriyi nazikçe temizler, cildi pürüzsüz ve yumuşak hale getirir.



### Büyük Yuvarlak Delik Başlığı

• Siyah noktaları temizler ve cildi sıkılaştırır. Kullanım sırasında yavaşça yukarı doğru hareket ettirin, bir noktada uzun süre kalmayın.



### Orta Yuvarlak Delik Başlığı

· Yağlı ciltler ve fazla yağ birikimi olan bölgeler için uygundur. Aynı şekilde yavaşça hareket ettirin.



### Küçük Yuvarlak Delik Başlığı

· Hassas ve ince ciltler için tasarlanmıştır. Siyah nokta temizliği sırasında daha nazik bir emiş gücü sağlar.



### Oval Delik Başlığı

· İnce çizgileri azaltmak ve cilt elastikiyetini artırmak için kullanılır. Bu başlıkla hızlı çekme hareketleri yaparak kan dolaşımını artırabilirsiniz.

## Geri Dönüşüm



Bu simge, bu ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).

## Teknik Özellikler

Model	FBC988 / ClearUp
Güç	2.5W
Çalışma Voltajı	3.7V
Şarj Süresi	Üç Buçuk Saat
Batarya	500mAh
Şarj Tipi	USB Type-C
Ağırlık	390G
Ölçüler	179*40*38mm

# **Fabcio Türkiye Destek / Yetkili Servisleri İthalatçı Firma**

Cihazı kullanırken yaşayacağınız tüm sorunlarda destek alabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir yanındaki teknik servis noktaları ile sorunsuz bir müşteri memnuniyeti yaşamamızı hedefliyoruz. Bölgenize en yakın Fabcio destek noktasına başvurarak son teknoloji ürünümüz için destek alabilir, ürününüzü sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Bize ulaşmak için ayrıca aşağıda yer alan telefon numaralarını kullanabilirsiniz.

TNS Bilişim Elekt. San. ve Dış Tic.Ltd.Şti.  
Atatürk Mah. Alemdağ Cad. İrfan Sok.No: 8/B  
Ümraniye / İstanbul  
Çağrı Merkezi: 0850 242 08 73

Üretici Firma:

Shenzhen Lizbella Technology Co., Ltd  
Adres : No.1202,C Block, 3rd Building, Huaqiang Creative  
Industrial Park, Biyan Community, Guangming District,  
Shenzhen City, Guangdong Province, China

**Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği)**

**ve 2014/35/ EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği )**

**sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.**



# Fabcio

## GARANTİ BELGESİ

### Ürün veya İthalatçı Firmasının:

Ünvanı: TNS Bilişim Elekt. San. ve  
Dış. Tic. Ltd. Şti.  
Adresi: Atatürk Mah. Alemdağ Cad.  
İrfan Sok. No: 8/B Ümraniye/İstanbul  
Telefonu: 0850 242 08 73

### Malın:

Cinsi: Gözenek Temizleme Cihazı  
Markası: Fabcio  
Modeli: FBC988 / ClearUp  
Garanti Süresi: 2 Yıl  
Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü  
Bandrol ve Seri No:

### Satıcı Firmasının:

Ünvanı: TNS Bilişim Elekt. San.  
ve Dış Tic.Ltd.Şti.  
Adresi: Atatürk Mah. Alemdağ Cad.  
İrfan Sok.No: 8/B Ümraniye / İstanbul  
Telefonu: 0850 242 08 73

E-posta: info@tnspazarlama.com

Fatura Tarihi ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

**TNS BİLİŞİM**  
Elektronik San. ve Dış. Tic.Ltd.Şti.  
Atatürk Mah. Alemdağ Cad. İrfan Sok.No:8-B  
Ümraniye-İSTANBUL  
Ünvan No: 29450325872

## Garanti Şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz).
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a. Sözleşmeden dönme, b. Satış bedelinden indirim isteme, c. Ücretsiz onarılmasını isteme, ç. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre,

garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

## **AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.**

**Garanti Süresi 2 (iki) Yıldır.**

**Bakanlıkça Tespit ve İlan Edilen Kullanım Ömrü 5 (Beş) Yıldır.**