


Fabcio

Viva
Tüy Alma Cihazı

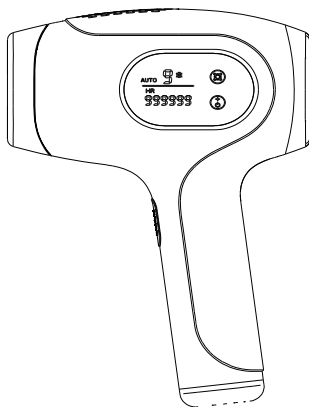

KULLANIM KILAVUZU
ve
GARANTİ BELGESİ

FBC977



Giriş

Fabcio Viva dünyasına hoş geldiniz! İpeksi ve pürüzsüz bir cilde kavuşmanıza sadece birkaç hafta var. Viva, tüy uzamasını sürekli olarak engellemede kullanılan en etkili yöntemlerden biri olarak bilinen Yoğun Işık Atımı (IPL) teknolojisini kullanır. Çeşitli cilt tiplerine ve tüy yapısına uygun güvenli ve etkili bir yöntem sunar. Tüy köklerine ışık darbeleri göndererek tüy büyümesini yavaşlatır ve uzun vadede pürüzsüz bir cilt sağlar. Ayrıca dahili soğutma sistemi sayesinde ciltteki rahatsızlık hissini en aza indirir ve kullanım sırasında konfor sağlar. Asıl olarak profesyonel güzellik salonlarında kullanılan bu ışık tabanlı teknolojiyi kolaylığından ve verimliliğinden evinizde de rahatlıkla yararlanabileceğiniz şekilde uyarladık. Viva, nazik bir şekilde çalışır ve size rahat edebileceğiniz uygunluk ve etkinlikteki farklı ışık yoğunluklarında kullanım olanağı sunar. İstenmeyen tüyler artık nihayet tarihe karışıyor. Kol, bacak, yüz, koltuk altı ve bikini bölgesi için kullanıma uygundur.

Önemli Bilgiler

Cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatlice okuyun. Kılavuzda verilen talimatlara uyulmaması veya bu kılavuzda belirtilenler dışında kullanılması kendinize zarar vermenize veya ürünün hasar görmesine neden olabilir. Ayrıca, okuduktan sonra, başkalarının kolayca görebileceği bir yerde saklayınız. Bu cihaz profesyonel bir güzellik merkezi ürünü değil, ev kullanımı için tasarlanmıştır. Bu ürün ışık ve ısı prensibini kullanır, yüksek ısı yayar ve lazer doğrudan gözenekler aracılığıyla kıl folikülünün köküne etki eder, kıl folikülü dokusunu tahrip eder, aynı zamanda kıl folikülünün kademeli olarak küçülmesini sağlayabilir, böylece epilasyon etkisi elde

edilir, ardışık 4~6 kez kıl büyümesini önleyebilir. Tüy alma fonksiyonuna sahip bir üründür. IPL aydınlatma teknolojisi kullanılarak ev ortamında güvenle kullanılabilir. Gücü, farklı parçaların kullanımına uygun şekilde 9 dereceye kadar dikkatlice ayarlanabilir. Güvenli bir epilasyon sağlamak için cilt rengine ve tüy durumuna göre ayarlanabilir. Işınlama sayımı fonksiyonu sayesinde kullanıcılar ekranı izlerken kolayca işlem yapabilirler.

Güvenlik Önlemleri

1. Cihazı kullanmadan önce, cilt tipinizi belirlemek için cilt testi yapın.
2. Hassas veya tahriş olmuş bölgelerde kullanmayın.
3. Su ile temas ettirmeyin veya banyoda kullanmayın.
4. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
5. Hamileler, emzirenler ve ışığa duyarlılığı olan kişiler bu ürünü kullanmamalıdır.
6. Lokal veya sistemik inflamasyonu olan hastalarda kullanmayınız.
7. Hafif alerjisi olan veya hafif alerji geçmişi olan kişiler için uygun değildir.
8. Hafif alerjiye neden olabilecek hastalıkları olan veya bir hafta içinde ilaç kullanan kişiler tarafından kullanılmamalıdır (çünkü ilaçlar hafif alerjiye neden olabilir).
9. Kalp pili ve insülin pompası gibi implante edilebilir tıbbi cihazlar kullanan ve yapay kalp gibi yaşam destek tıbbi cihazlarına güvenen kişiler bunları kullanmamalıdır.
10. Elektrokardiyometreler gibi giyilebilir elektronik tıbbi cihazlar hata dalgalanmalarına yol açabileceğinden, dikkatli kullanılmalı gerektir.
11. Bu ürünü anormal cilt ve duylulara sahip (diyabet vb.) büyüyen çocuklarda kullanmayınız.
12. Bu ürünü epilepsi hastalarında kullanmayınız.
13. Cihazı zor veya hassas bölgelerde (ayak bileği ve

kemikli bölge) denemeyin.

14. Eğer cilt kanseri geçmişiniz varsa bu ürünü kullanmayınız.

15. Alfa-Hidroksi Asitler (AHA), Beta-Hidroksi Asitler (BHA), topikal tretinoin ve azelaik asit ile cilt tedavisi görüyorsanız veya son 7 gün içinde böyle bir tedavi gördüyseniz asla kullanmayın.

16. Son 6 ay içinde isotretinoin Accutane veya Roaccutane'in herhangi bir formunu kullandıysanız asla kullanmayın. Bu tedavi, cildin çiziklere, yaralara ve tahrişe karşı daha duyarlı olmasına neden olabilir.

17. Işığa duyarlı hale getiren maddeler veya ilaçlar alıyorsanız ilacınızın kullanma talimatını kontrol edin. Kullanma talimatında foto-alerjik ve fototoksik reaksiyonlara neden olabileceği veya ilacı kullanırken güneşten kaçınmanız gerektiği belirtiliyorsa cihazı kesinlikle kullanmayın.

18. Her tedavi önce en az 1 haftalık temizlenme süresi gerektiren, çok yoğun aspirin kullanımı dahil, pıhtı önleyici ilaçlar alıyorsanız asla kullanmayın.

19. Son 3 ay içinde radyasyon terapisi veya kemoterapi gördüyseniz asla kullanmayın.

20. Cildin ısıya duyarlılığını azaltan ağrı kesiciler kullanıyorsanız asla kullanmayın.

21. Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar alıyorsanız asla kullanmayın.

22. Polimorfoz ışık erupsiyonu (PMLE), solar ürtiker, porfiri gibi ışığa duyarlılık ile ilgili bir hastalığınız varsa asla kullanmayın.

23. Keloid yarası formasyonu veya yaranın zor iyileşmesi gibi kolajen bozukluk geçmişiniz varsa asla kullanmayın.

24. Herhangi bir pıhtılaşma bozukluğunuz varsa asla kullanmayın.

25. Bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalık (HIV enfeksiyonu ve AIDS de dahil olmak üzere) geçirdiyseniz asla

kullanmayın.

26. Vitiligo gibi bir cilt pigmentasyon bozukluğunuz varsa asla kullanmayın.

27. Uygulama yapılacak bölgelerde enfeksiyon, egzama, yanık, kıl folikülü iltihabı, açık yaralar, sıyrıklar, herpes simpleks (uçuk), yara veya lezyon ve hematomlar (morarmalar) varsa asla kullanmayın.

28. Tahriş olmuş (kızarık veya kesik), güneş yanığı olan, bronzlaşmış veya bronzlaştırıcı uygulanmış ciltlerde asla kullanmayın.

29. Göz çevresi ve kaşların üzerinde ve çevresinde asla kullanmayın.

30. Dudaklar, saç derisi, meme uçları, bacak arası, meme ucu çevresi, labia minora, vajina, anüs üzerinde ve burun delikleri ve kulakların iç kısmında asla kullanmayın.

31. Uzun süre kalıcı deodorant kullandığınız bölgelerde asla kullanmayın. Bu durum, cilt reaksiyonlarına neden olabilir.

32. Silikon implant, deri altı enjeksiyon kanalı (insülin dağıtıcı) veya hızma gibi yapay nesnelerin üzerinde veya yakınında asla kullanmayın.

33. Erkekler, sakal bölgesi de dâhil olmak üzere yüz ve boyun bölgelerinde ve genital bölgenin tamamında cihazı kullanmamalıdır. Bu bölgelerdeki tüylerin özellikleri farklıdır. Cilt yanabilir (ağrı, uzun süreli cilt kızarıklığı ve pigment değişiklikleri oluşabilir).

34. Eğer anormal derecede birden fazla siyah pigmentli ana lekeniz varsa veya bir doktor tarafından bu ürünün kullanmanın uygun olmadığı söylendiyse, lütfen doktorunuzun tavsiyelerine uyun.

35. Cildi klor dezenfektanıyla tahriş etmemek için ışınlanmadan sonra 48 saat içinde yüzme havuzuna girmeyin.

36. Aynı bölümün yalnızca bir kez ışınlanması gerekir, sürekli çalıştırmayın.

37. Tüy alma cihazını her kullandığınızda, lütfen sürekli çalışma süresini 10 dakikadan fazla olmayacak şekilde kontrol edin. Geniş bir aralığın işlenmesi gerekiyorsa, işlem gruplar halinde gerçekleştirilir. Kullanmaya devam etmeden önce gücü kapatıp 10 dakika dinlenmeniz önerilir.

Not: Gözlere zarar vermemek için flaş ışığına doğrudan bakmayın. Bu liste tüm olasılıkları kapsayıcı nitelikte değildir. Cihazı kullanıp kullanamayacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza danışmanızı öneririz.

Genel Notlar

1. Kullanmadan önce, cihazın normal olduğundan emin olun.
2. Cilt rengi değişirse (koyulaşma veya açılma), kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın.
3. Benlerde, dövmelede, sanatsal makyaj parçalarında veya çevresinde kullanmayın.
4. Güneşlendikten veya güneş kremi kullandıktan sonra kullanmayın. Aynı zamanda, güneş kremi kullanmış kişiler kullanmamalıdır.
5. Güneş yanığı veya cildiniz üzerindeki etkisi konusunda şüpheniz varsa, bu cihaz teknolojisini kullanmayın.
6. Kullanımdan önce bronzlaşma olmadığından emin olmak için bir süre beklemeniz gerekir.
7. Kendinizi iyi hissetmediğinizde veya cildiniz anormal hissettiğinizde kullanmayın.
8. Duştan sonra kullanmayın.
9. Kimyasal peeling veya ovma işlemlerinden sonra bolca zaman ayırın.
10. Koyu lekeler, diş ipi, tıkanıklık, siğiller ve çevredeki

renkten daha koyu olan dięer bölgelerde kullanılmamalıdır. Bu bölgeler ışık enerjisini kolayca emer ve cilde zarar verebilir. Varisli damarlar ve damarsal malformasyonlar kesinlikle yasaktır. Plastik cerrahi veya ameliyattan kaynaklanan yara izlerine uygulamayın.

11. Yaralar, egzama, folikülit, sivrisinek ısırıkları ve saçkıran yasaktır.

Nasıl Çalışır?

1. Yoęun Işık Atımı teknolojisiyle, cilde nazik ışık atımları uygulanır ve kıl kökü tarafından emilir. Ten rengi ne kadar açık olursa ve tüyler de ne kadar koyu renk olursa, ışık atımları o kadar iyi emilir.

2. Işık atımı, tüy folikülünün dinlenme aşamasına geçmesini sağlar. Sonuç olarak, tüyler doğal yolla dökülür ve tüy uzaması engellenir.

3. Tüy büyümesi döngüsü, farklı aşamalardan oluşur. IPL teknolojisi, yalnızca tüy büyüme aşamasındayken etkili olur. Tüm tüyler aynı anda büyüme aşamasında olmayabilir. İşte bu yüzden, tüm tüylerde büyüme aşamasında etkin bir şekilde uygulama yapıldığından emin olmak için başlangıç uygulama aşamasını (aralarında 2 hafta olmak üzere 4 uygulama) ve sonrasında izleme uygulama aşamasını (4 haftada bir rötuş) takip etmenizi tavsiye ediyoruz. İpucu: Uzun süre etkili bir tüy alımı için 4 haftada bir rötuş önerilir.

Önerilen Tedavi Programı

Tüylerin etkili bir şekilde azalmasını sağlamak için başlangıç uygulama programını izleyin. İlk 4 uygulama için Fabcio Viva cihazını, tüm tüylerde uygulama yapıldığından emin olmak için 2 haftada bir kullanın.

- Planlanan uygulama tarihinden önceki veya sonraki 3 gün içinde bir uygulama gerçekleştirin.
- Planlanan uygulama tarihinden önceki veya sonraki 3 gün içinde kendinize uygulama yapmazsanız başlangıç aşamasına yeniden başlayın. 2 haftada 1 uygulama olmak üzere 4 uygulama planlayın.

Not: Başlangıç aşamasına yeniden başlamazsanız tüylerin etkili bir şekilde azalmadığını görebilirsiniz.

Not: IPL uygulamalarından biri yerine başka bir tüy alma yönteminin (ağda, epilasyon vb.) kullanılması istenen oranda tüy azaltma sağlamaz. Fabcio Viva uygulamaları arasında tüylerinizi almak isterseniz normal tüy alma yönteminizi (tüy dökücü kremler hariç) kullanabilirsiniz.

Rötuş Aşaması

Başlangıç aşamasından (4 uygulama) sonra 4 haftada bir rötuş yapmanızı tavsiye ediyoruz.

4 haftada bir uygulama gerçekleştirin. Tüylerin etkili bir şekilde azalmasını sağlamak için bu işlemi 8 kez tekrarlayın. Bunun amacı, bu olumlu sonucu korumak ve ciltteki pürüzsüzlüğün tadını aylarca çıkarabilmenizdir.

- Planlanan uygulama tarihinden önceki veya sonraki 4 gün içinde bir uygulama gerçekleştirmenizi öneririz.
- Sonuçlar, kişideki tüy uzama hızına ve farklı vücut bölgelerine göre değişiklik gösterebilir.
- Rötuş aşamasını tamamladıysanız ve uygulamaya devam etmeniz gerektiğini gördüyseniz (tüyler yeniden uzamaya başlarsa) başlangıç aşamasına yeniden başlamanızı tavsiye ederiz.

Not: Cihazın daha sık kullanılması, etkisini artırmaz.

İpucu: Planlanan uygulamaları kendinize hatırlatmak amacıyla tedavi programı için takviminizi işaretleyin.

Uygulamadan Beklenebilecekler

Başlangıç Aşamasında

- İlk uygulamadan sonra, tüylerin dökülmesi 1-2 hafta sürebilir. Başlangıç uygulamalarını takip eden ilk haftalarda, hala bazı tüylerin uzadığını göreceksiniz. Bunlar, ilk uygulamaların yapıldığı sırada büyüme aşamasında olmayan tüylerdir.

- 2-3 uygulamadan sonra, tüy uzamasında gözle görülür bir fark olacaktır. Ancak, tüm tüylerin etkili olarak uygulamadan geçmesi için, önerilen uygulama programına uygun olarak devam etmek önemlidir.

- 4 uygulamadan sonra, Fabcio Viva ile uygulama yaptığınız bölgelerdeki tüy uzamasında önemli ölçüde bir azalma olacaktır. Tüy yoğunluğundaki azalma da gözle görülebilir

Rötuş Aşaması Sırasında

- Sonucun kalıcı olmasını sağlamak için tedaviyi sık rötuşlar (her 4 haftada bir) yaparak uygulamaya devam edin.

Kullanım Sırasında Alınacak Önlemler

1. Kullanırken, gözler gibi hassas bölgelere doğrudan ışık maruziyetinden kaçınınız. Birlikte verilen koruyucu gözlükleri taktığınızdan ve doğrudan ışığa bakmadığınızdan emin olun.
2. Bu ürünü kullanmadan önce, lütfen halkayı ve diğer metal parçaları çıkarınız.
3. Lütfen çocukların olmadığı bir alanda çalışın ve ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
4. Bu ürünü kullanmadan önce, cildinizin iyi durumda olduğundan emin olmak için lütfen yüz makyajınızı ve parfümünüzü iyice temizleyiniz.

Cihazın Bölümleri Ve Fonksiyonları

Her uygulamadan önce varsa görünür tüyleri alın. Tüyleri tıraşlayabilir, epilator veya ağda kullanabilirsiniz. Cildinizde yeni tüyler çıkmadan uygulamaya başladığınızdan emin olun. Ağda yapmayı tercih ederseniz Fabcio Viva'yı kullanmadan önce 24 saat bekleyin.

Not: Tıraş, epilasyon veya ağda ciltte tahrişe neden oluyorsa cilt tahrişi geçene kadar cihazı kullanmamanızı tavsiye ederiz.

Cildinizi temizleyin ve kurulaşın. Üzerinde herhangi bir losyon veya jel olmadığından emin olun.

1. LED Ekran: Flaş sayısı, mod, güç seviyesi ve buz noktası aktif durumu gibi bilgileri gösterir.

2. Flaş Başlığı: Cilde ışık atışı yapar ve tüy köklerini hedef alır.

3. Flaş Butonu: Epilasyon işlemi için flaş ışığını tetikler.


4. Mod Seçim Tuşu: Manuel ve otomatik mod arasında geçiş sağlar.


5. Güç Seviyesi Ayar Tuşu: Cilt tipinize uygun ışık gücünü seçmenize olanak tanır.


6. Soğutma Fonksiyonu: Buz noktası teknolojisini etkinleştirir ve cilt yüzeyini serinletir.

Kullanım Kolaylığı için Ergonomik Tasarım

Cihaz, elde rahat bir tutuş sağlayan ergonomik bir yapıya sahiptir. Hafif tasarımı sayesinde uzun süre kullanımda bile yorgunluk hissi yaratmaz.

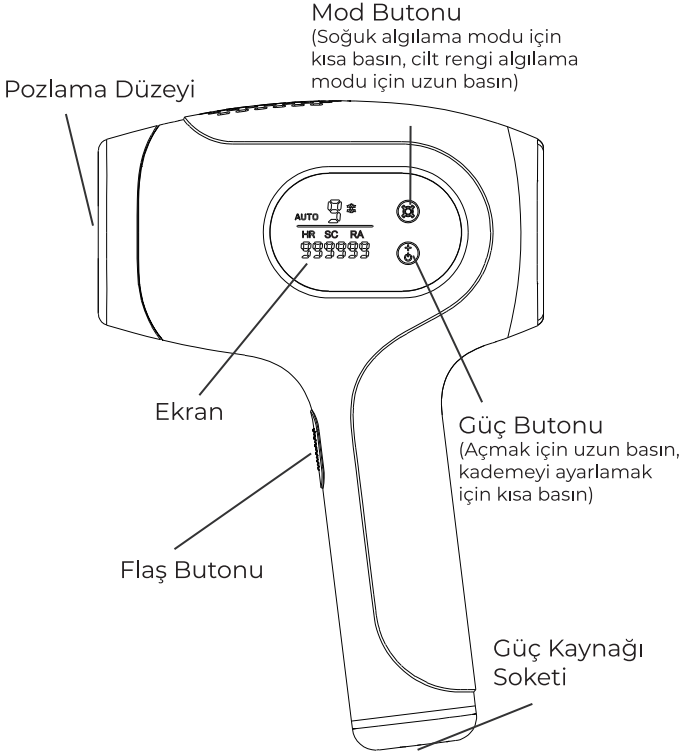

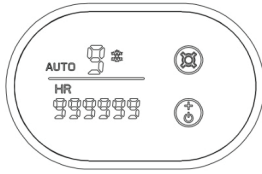

Sembol	Özellik	Değerler
HR	Tüy Alma Şekli	Yaklaşık 999.999 kez
AUTO	Otomatik sürekli ışınlama modu	
Numara (1-9)	Pozlama düzeyi	1'den 9'a kadar olan sayıları temsil eder (seviye 9 ölçeği)
	Soğuk Mod	
6 Basamaklı Sayı	Kalan pozlama sayısı	Yaklaşık 999.999 kez

Cilt Hassasiyet Testi

İlk kullanım için, cildin daha az görünen bir bölümünü seçin ve test için şu adımları izleyin.

Lütfen gücü açın ve pozlama seviyesini 1'e ayarlayın. Işınlama için işlem adımlarını ve önlemleri izleyin. Işınlamadan sonra yaklaşık 30 dakika boyunca ışınlanan bölgede ağrı veya kızarıklık olup olmadığını teyit edin. Işınlanan bölgede herhangi bir anormallik yoksa, kullanmaya devam edebilirsiniz. Herhangi bir anormallik varsa, lütfen kullanmayı bırakın. Kullanımdan sonra şiddetli ağrı ve kızarıklık yaşarsanız ve iki gün sonra düzelmezseniz, kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Kullanım Adımları

1. Tüy alma cihazını kullanmadan önce, lütfen tüy alma bölgesindeki tüyleri tıraş edin ve tıraş edilen bölgeyi temizleyin ve kurutun, böylece ışık tüy köklerine daha kolay ulaşabilir ve tüy alma etkisini artırabilir.

2. Lütfen koruyucu gözlük takın ve AC adaptör fişini cihaza takın. Fiziksel ışık "KAPALI" gösterdiğinde, yanar.

3. Cihazı başlatmak için güç düğmesine 2 saniye boyunca uzun basın. Kullanmadan önce modu onaylamak için lütfen ekranı kontrol edin. Kullanıma başlarken, cilt tonu seviyenize uygun otomatik olarak ayarlamak için cilt tonu algılama modunu seçin. Cilt rengi algılama moduna girmek için mod düğmesini 2 saniye basılı tutmanız yeterlidir. Cilt ne kadar beyazsa, derecelendirme numarası o kadar yüksek olur.

4. Lütfen ihtiyaçlarınıza göre modları değiştirin. Soğuk epilasyon yapıyorsanız, ekranda "❄" görüntülediğinden emin olun.

5. Pozlama seviyesi 9'a ayarlanabilir. Güç seviyesi güç düğmesine kısa basılarak ayarlanabilir. İlk kez kullananlar en düşük seviye olan "1" ile başlamalı ve cilt durumuna göre seviyeyi kademeli olarak artırmalıdır. Derecelendirme ne kadar yüksekse, etki o kadar güçlüdür, ancak aynı zamanda cilt sorunlarına neden olma riski de artar. Lütfen rahatsızlığa neden olmayacak bir seviyeye ayarlayın.

6. Işınlama Ayarları

a. Manuel ışınlama modu (küçük aralıklı tüy alma için uygundur): Tüy alma cihazı açıldığında, otomatik olarak manuel ışınlama moduna girecektir. Işınlama düğmesine her basıldığında, bir ışınlama gerçekleştirilecektir.

b. Otomatik ışınlama modu (büyük ölçekli tüy alma için uygundur): Tüy alma cihazı güç kaynağına bağlandıktan sonra, çekim düğmesini uzun süre takip edin, ekranda "AUTO" kelimesi görünecek ve otomatik ışınlama modunun

geçtiğini gösterecektir. Çekim düğmesini tekrar hafifçe takip ederseniz, manuel moda geri dönün. Kullanımdayken, otomatik ışınlamayı başlatmak için lütfen başlığı *** üzerine dikey olarak yerleştirin.

7. İşlem adımları: Lütfen cihazı sağlam tutun ve pürüzsüz yüzeyi cilde dikey olarak takın.

a. Manuel aydınlatma modunda, bir sonraki işlem- den önce ışığın sönmesini bekleyin. Işık söndüyse, yeni bir işlem turu başlatmak için aydınlatma düğmesine basın. Mevcut parçayı işlemeyi bitirdiğinizde, işlemeye devam etmek istediğiniz alana geçin ve aynı şekilde devam edin. Her parçanın yalnızca bir kez işlenmesi gerekir.

b. Otomatik ışınlama modunda, sürekli işleme sürecini başlatmak için lütfen çekim düğmesini uzun süre takip edin. Mevcut parçayı işlemeyi bitirdiğinizde, işleme devam etmek istediğiniz alana geçin ve aynı şekilde devam edin. Pürüzsüz yüzeyin ciltle yakın temas halinde olduğundan emin olmak için, pürüzsüz yüzey hareket ettirilirken sürekli tedavi 8 saniye boyunca sürekli olarak gerçekleştirilebilir.

8. Son adım: Tüm çalışma tamamlandığında, lütfen gücü kapatmak için güç düğmesine yaklaşık 2 saniye uzun basın. Ayrıca, sistem herhangi bir işlem yapılmadan 5 dakika sonra güç kaynağını otomatik olarak kesecektir.

9. Lütfen tüy dökücü cihazınızı kapattıktan sonra AC adaptörünün fişini prizden çekin.

10. Işınlanmış yüzeyi soğuttuktan sonra (yaklaşık 10 dakika), alkolsüz ıslak bir kâğıt havlu kullanın ve ışınlanmış yüzeyi yumuşak bir bezle temizleyin.

11. Cihazı temizledikten sonra lütfen tekrar kutusuna koyun. Havalandırılmış ve kuru bir yerde saklayın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

12. Kıl alma işleminden sonra cilt bakımı: Cildi 20 dakika dinlendirin ve ardından tedavi edilen bölgeyi nemlendirmek

için nemlendirici losyon ve diğer ürünleri kullanın. Hafif ağrı için, ışınlanan bölgeye 30 dakika ila 1 saat boyunca soğuk kompres uygulayın veya tüy alma bölgesine nemlendirici tonik veya nemlendirici krem kullanın. Tahriş edici kozmetikleri hemen kullanmaktan kaçının. Uyarı: Uygulama sonrasında ciltte tahriş veya kızarıklık yaşarsanız, cildinize bir ürün uygulamadan önce bunlar geçene kadar bekleyin. Cildinize bir ürün uyguladıktan sonra ciltte tahriş veya kızarıklık yaşarsanız, bu bölgeyi üründen suyla arındırın. Hâlâ cilt reaksiyonları yaşıyorsanız cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

13. Tüy alma işleminden sonra etkilenen bölgeyi iki hafta boyunca güçlü güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçının. Bu bölgedeki cilt daha hassas olduğundan, mevsimden bağımsız olarak SPF30 veya daha yüksek bir güneş kremi kullanmanız önerilir. Ayrıca, geceleri tüyleri almak güneş yanıklarını önleyebilir.

Soğuk Mod Özelliği

Soğuk tüy alma işleminde, cihazın başı ciltle temas halindeyken, soğuk mod epidermisi etkili bir şekilde soğutarak ısıyı ve ağrıyı azaltır ve ağrısız tüy alma işlemine ulaşır.

Kullanım Talimatları

Hazırlık

- Uygulama öncesinde epilasyon yapılacak bölgeyi temizleyin ve tamamen kurulayın.
- Tüyler cilt yüzeyine yakın olmalıdır. Bu nedenle, cihazı kullanmadan önce bölgeyi traş edin.

Soğuk Mod Özelliği

Kullanım

- Güç düğmesine basarak cihazı açın. LED ekrandan uygun güç seviyesini seçin (1-5 arası). Daha hassas ciltler için düşük seviyeler önerilir.
- Tedavi etmek istediğiniz alan üzerine cihazın başlığını yerleştirin.
- Manuel mod için flaş düğmesine basın veya otomatik modda cihazı yavaşça hareket ettirin.

Uygulama

- Cihazın flaş başlığını cilt yüzeyine tamamen yerleştirin.
- Manuel modda flaş butonuna basarak ışık atışı yapın.
- Geniş alanlarda otomatik modu seçerek cihazı yavaşça hareket ettirin.

Sonrasında

- Uygulama sonrası cildinizi nemlendirin.
- Hassas ciltlerde kızarıklık oluşursa, bir buz torbası kullanarak bölgeyi rahatlatabilirsiniz.
- Doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçının ve güneş koruyucu kullanın.

Önemli Notlar

- Uygulama sırasında gözlerinizi korumak için ışığa doğrudan bakmayın ve suya maruz kalmaktan kaçının.
- Cilt semptomları ve yaraları olan bölgeler ışınlanmamalıdır.
- Aşırı hassasiyet durumunda cihazın kullanımını durdurun ve doktorunuza danışın.
- Belirli kullanım aralığı ve etkisi bireysel farklılıklardan etkilenir.
- Bu cihaz, lazer tedavilerine göre cilt üzerinde daha az yan etkiye sahiptir, bu da makyaj ve yüz yıkama işlemlerinin aynı gün yapılmasına olanak tanır. Bakım yapılırken bir karıncalanma hissedebilirsiniz, ancak lazer bakımı kadar ağrılı değildir.

Kullanım Talimatları -2

1. Ürün adaptöre bağlandığında cihazdan bip sesi gelir ve açıldığında bekleme moduna geçmek için ekranda OFF yazısı belirir.

2. Cihazı açmak için güç düğmesini 2 saniye basılı tutun. Açıldığında, cihaz bir bip sesi çıkarır, ekran aydınlanır ve kalan sayı görüntülenir. Cihaz HR modunda (birinci kademe) olur ve buz paketi simgesi görüntülenir. İki dokunmatik düğme arasındaki mavi ışık yanar. Aynı anda, dahili fan kapasitörü şarj etmeye başlar, kademe simgesi yanıp söner ve tamamen şarj olduktan sonra açık kalır. Aynı anda soğutma da başlar. Kademeleri 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 8 → 7 → 6 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1 şeklinde bir döngü halinde ayarlamak için güç düğmesine kısa basın. Güç düğmesine her basıldığında, cihaz bir bip sesi çıkarır.

3. HR/SC/RA modları arasında geçiş yapmak için mod düğmesine tıklayın ve herhangi bir moda geçmek varsayılan olarak birinci kademeye geçecektir. Dondurma işlevini kapatmak için mod düğmesine uzun basın ve ekran üzerindeki dondurma simgesi kapanacaktır. Buz paketi işlevini etkinleştirmek için mod düğmesine tekrar basın ve basılı tutun ve ekran üzerindeki buz paketi simgesi yanacaktır. Mod düğmesine her bastığınızda, cihaz bip sesi çıkaracaktır.

4. Cilt rengi tanıma fonksiyonuna girmek için güç düğmesini ve buz düğmesini aynı anda 2 saniye basılı tutun ve ekrandaki mod HR modudur; Kademe simgesi 0 kademeyi gösterir; bu noktada, ışık çıkışı cilde değiştiğinde, cihaz cildin rengine göre ışık yaymak için kademeyi otomatik olarak ayarlayacaktır. Cilt rengi ne kadar beyazsa, kademe o kadar yüksektir. Cilt rengi tanıma modunda yalnızca 5 kademe vardır. Akıllı cilt rengi tanıma modundan çıkmak için güç düğmesini ve buz düğmesini aynı anda 2 saniye basılı tutun. Mod düğmesine her basıldığında cihaz bir bip sesi çıkarır.

5. Işık çıkışı cilde temas ettiğinde, yanıp sönen bir ışık sayısı görüntüler (bu sırada cihaz ışık yakmaya hazır durumdadır).

Işık düğmesine tıklayarak ışık verin (kademe simgesi yanıp söndüğünde ışık veremez). Otomatik ışık moduna girmek için ışık düğmesine uzun basın. Bu sırada, ekran üzerindeki otomatik ışık modu simgesi (AUTO) yanacaktır. Işık portu cildi algıladığında otomatik olarak yanabilir. Otomatik ışık modundan çıkmak için ışık düğmesine kısa basın ve cihaz her yandığında bir bip sesi çıkaracaktır. Işık düğmesine basıldığında damla sesi yoktur.

6. Cihaz 5 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında otomatik olarak kapanacaktır. Cihaz normal şekilde kapatıldıktan sonra, durmadan önce 10 saniye açık kalır.

Mod ve Güç Seviyesi Seçimi

Manuel Mod: Hassas bölgeler (yüz, koltuk altı, bikini hattı) için idealdir. Flaş butonuna her basışta tek bir ışık darbesi gönderir.

Otomatik Mod: Geniş bölgeler (kol ve bacaklar) için uygundur. Cihazı cilt üzerinde hareket ettirirken flaşlar otomatik olarak üretilir.

Güç Seviyeleri:

Seviye 1-2: Hassas ve açık renkli ciltler için uygundur.

Seviye 3-4: Normal cilt tipleri için önerilir.

Seviye 5: Koyu renkli tüyler ve daha kalın yapılar için uygundur.

Not: Yanlış güç seviyesi seçimi ciltte tahrişe neden olabilir.

Cilt Tipleri ve Uygulama Talimatları

Cilt Tipine Göre Kullanım

- IPL teknolojisi, açık ve orta cilt tonları (Fitzpatrick Tip I-IV) için uygundur.
- Çok koyu cilt tonları veya ışığa karşı hassasiyeti olan kişiler bu cihazı kullanmamalıdır. Çok koyu cilt tonlarında (Tip V-VI)

ciltte tahriş riski nedeniyle kullanılmamalıdır. Siyah tenliler ve yeni bronzlaşmış kişiler için uygun değildir. Ürünü ilk kez kullanırken lütfen 1. seviyeden başlayın. Cilt tahrişini gözlemleyerek kullanım için lütfen çıkış kademesini ayarlayın.

• Tüy alma tıbbi bir uygulama değildir. Bu nedenle doktor izni gerektirmez. Vücut kılı sorunlarıyla mücadele eden herkes için uygundur. (☒ Çocuklar ve hastalığı olanlar hariçtir. Lütfen güvenlik önlemlerine bakın)

Kimler Kullanamaz

- Hamileler veya emziren anneler.
- Epilepsi veya ışık duyarlılığı rahatsızlığı olan kişiler.
- Güneş yanığı, yara, egzama, sedef hastalığı veya diğer cilt problemleri olan bölgelerde.

Tüy Renkleri

• IPL, koyu pigmentlere sahip tüylerde daha etkili sonuçlar verir (siyah ve kahverengi). Açık sarı, kırmızı ve gri tüylerde etkisi sınırlıdır. Çünkü bu tüyler ışığı yeterince emmez.

Kullanım Sıklığı ve Sonrası Bakım

- İlk 4 Hafta: Haftada 2 kez uygulama yapılması önerilir.
- 5-8 Hafta: Haftada 1 kez uygulama yeterlidir.
- 9. Hafta ve Sonrası: Tüy büyüme hızına bağlı olarak ayda 1 kez bakım uygulaması yapılmalıdır.
- İlk ay (3 ila 5 günde bir): Işınlama, kıl köklerinin küçülmesine ve saçların yumuşak ve ince olmasına neden olur.
- İkinci ay (haftada bir): Işınlanmaya devam eden kıllar daha yavaş uzar ve hacmi azalır.
- Üçüncü ay (iki haftada bir) Düzenli ışınlama, kıl büyümesini engelleyebilir. Siyah noktalar olmadan pürüzsüz bir cilt sağlayabilir.
- Dördüncü ay (ayda bir) Işınlanan bölgedeki kıllar, büyüme inhibisyonu durumuna girerek cildi pürüzsüz hale getirir.

Önemli Not: Hassas bölgelerde (yüz, bikini bölgesi) daha düşük güç seviyeleri kullanın. Tüylerin tamamen azalması için kullanım süresi kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Etkiler, bireysel yapıya ve tedavi bölgesine göre değişir. Önemli bir etkinin algılanması genellikle altı ay ila bir yıl sürdüğünden, ışınlamaya devam edin.

Uygulama Sonrası Bakım

- Uygulama yapılan alanı nazikçe temizleyin ve nemlendirici sürün.
- Doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçının ve gerekirse güneş koruyucu kullanın.
- Aşırı kızarıklık veya tahriş durumunda, cildi yatıştırmak için soğuk bir kompres uygulayın.

Uygulama Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Uygulama yapılan bölgeye 24 saat boyunca kozmetik ürünler (deodorant, parfüm vb.) sürmeyin.
- Yüzme, sauna ve buhar banyosundan kaçının.
- Cilt tamamen iyileşene kadar epilasyon yapılan bölgeyi tahriş edebilecek fiziksel temaslardan uzak durun.

Not: Düzenli bakım ve kullanım, daha iyi sonuçlar almanızı sağlar. Cihazı her uygulamadan sonra temizleyerek uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Gözlerinizi korumak için cihazın flaş ışığına doğrudan bakmayın.
- Hassas bölgelerde (yüz, bikini hattı) düşük güç seviyeleri kullanın.
- Cihazı suyla temas ettirmeyin veya banyoda kullanmayın.

Uyarı

Cihazın doğru kullanılmaması ciltte yanıklara, tahrişe veya diğer rahatsızlıklara neden olabilir. Her zaman kullanım talimatlarına uyunuz.

Tedavi Alanları

- **Yüz:** Çene, yanaklar ve bıyık bölgesi (düşük güç seviyesiyle).
- **Bacaklar ve Kollar:** Daha geniş yüzey alanları için otomatik mod önerilir.
- **Koltuk Altı ve Bikini Hattı:** Hassas bölgelerde düşük güç kullanımı önerilir.

Vücut; özellikle bacaklar, kollar ve karın gibi boyun hattının aşağısındaki geniş bölgeler

Yüz; dudak üzeri, çene ve yanaktaki duyarlı cilde güvenli ve hassas bir uygulama. Cihazı çene hattı ve çene gibi keskin hatlara sahip bölgelerde kullanırken cihazın cildinize tam olarak temas etmesi ve ışık atımı yapması zor olabilir.

Koltuk altı; ulaşılması zor koltuk altı tüylerine erişmek için özel olarak tasarlanmıştır.

Bikini bölgesi; bikini bölgesinde daha etkin bir uygulama sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu bölgedeki tüyler bacak tüylerinden daha kalın ve daha güçlüdür.

Hassas bölge; bikini ve koltuk altı bölgelerinde kullanım için hassas ve etkin bir biçimde kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

Tedavi Sonuçları ve Süresi

- İlk Etkiler: Tüylerin büyüme hızında azalma ilk 4 hafta içinde gözlemlenir.
- Uzun Vadeli Etkiler: 8-12 hafta arasında belirgin şekilde daha az tüy büyümesi sağlanır.
- Bakım: Kalıcı sonuçlar için her 4-6 haftada bir bakım uygulaması yapılmalıdır.

Not: Sonuçlar, tüy yapısına ve cilt tipine göre değişiklik gösterebilir.

Soğutma Teknolojisi

Konforlu ve Güvenli Kullanım

- Cihazın buz noktası teknolojisi, epilasyon sırasında cilt yüzeyini serinleterek rahatsızlık hissini minimuma indirir.
- Soğutma fonksiyonu sayesinde kızarıklık ve tahriş riski büyük ölçüde azaltılır.

Nasıl Aktive Edilir?

- Cihazı açtıktan sonra soğutma butonuna basın.
- LED ekranda "Cool" simgesi belirdiğinde buz noktası teknolojisi aktif hale gelir.

Hangi Durumlarda Kullanılmalı?

- Hassas ciltlerde kullanım sırasında.
 - Daha yoğun bir epilasyon işleminde konforu artırmak için.
- Not: Soğutma işlevi cihazın enerji tüketimini artırabilir, bu nedenle yalnızca gerekli durumlarda aktif edin.

Buz Noktası Teknolojisinin Avantajları

- Hassas ciltler için daha az ağrı hissi.
- Uzun uygulamalarda cilt yüzeyini serin tutma.
- Daha hızlı iyileşme ve konforlu bir deneyim.

Kullanıcı Geri Bildirimleri

Buz noktası teknolojisi, özellikle hassas cilt tipleri için idealdir ve geleneksel IPL cihazlarına göre daha rahat bir deneyim sunar.

Anormal Hissettiğinizde Yapılacaklar

Cildinizin ve vücudunuzun sağlığını korumak için lütfen ürünü talimatlara göre doğru şekilde kullanın. Lütfen kullanırken önlemleri takip edin. Aşağıda yaygın sorunlar ve bunların nasıl çözüleceği yer almaktadır.

Bıçak saplanır gibi bir ağrı vardı	Aynı maruziyet seviyesinde bile, ağrı bireysel farklılıklara göre değişebilir. Karıncalanma hissi (haşlanmaya benzer) oluşursa, maruziyetin yoğunluğunu azaltmanız önerilir. 1. derece ürünler kullanıyorsanız, lütfen bunları derhal kullanmayı bırakın.
Ciltte kızarıklık veya biraz yanma hissi	Bu normaldir ve zamanla doğal olarak azalacaktır. Radyasyona maruz kalan bölgeyi sıkıktırmak için soğuk havlular kullanılabilir ve bakım için tonik ve nemlendirici kullanılabilir.
Yanık kokusu var	Bu normal bir durumdur. Olası sebep, atık kılların kullanımdan önce tıraş edilmemiş olmasıdır. Kullanımdan önce fazla kılları tıraş ettiğinizden emin olun.

Bakım Ve Temizlik

Cihaz Bakımı

- Kullanım sonrası cihazın flaş başlığını yumuşak ve kuru bir bezle silin.
- Hassas parçalar için alkolsüz temizleme solüsyonu kullanılabilir.
- Flaş başlığını doğrudan suyla yıkamayın veya aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.

Depolama

- Cihazı kuru ve serin bir yerde saklayın.
- Uzun süre kullanılmayacaksa cihazı orijinal kutusunda muhafaza edin.

- Kablonun kıvrılmadan düzgün bir şekilde sarıldığından emin olun.

Başlık Değişimi

- Flaş başlığı, cihazın ömrü boyunca 999.999 flaşa kadar dayanıklıdır. Ancak hasar görmesi durumunda, yalnızca orijinal yedek parçaları kullanarak değiştirin.
- Bakım Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
 - Cihazın hava giriş ve çıkış deliklerini düzenli olarak kontrol edin ve toz birikimini temizleyin.
 - Güç kablosunun hasarlı olmadığından emin olun. Hasar durumunda cihazı kullanmayı durdurun ve teknik servise başvurun.

Cihazın Avantajları

- Uzun ömürlü flaş kapasitesi (999.999 flaş).
- Buz noktası teknolojisiyle konforlu kullanım.
- Hem manuel hem de otomatik mod seçenekleri.
- Çeşitli cilt ve tüy tiplerine uygun.

Not: Bu kılavuzdaki tüm bilgiler, cihazın doğru ve güvenli kullanımını sağlamak için hazırlanmıştır. Teknik destek veya bakım gereksinimleriniz için garanti belgesinde yer alan iletişim bilgilerinizi kullanabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular(Sss)

1. Soru: Cihazı hangi cilt tipleri kullanabilir?

Cevap: IPL cihazı, Fitzpatrick Skalası'na göre Tip I-IV cilt tonları için uygundur. Çok koyu ciltlerde (Tip V-VI) önerilmez.

2. Soru: Flaş başlığı ne kadar dayanır?

Cevap: Cihaz, toplamda 999.999 flaş ömrüne sahiptir, bu da uzun yıllar kullanım için yeterlidir.

3. Soru: Uygulama sırasında acı hisseder miyim?

Cevap: Buz noktası teknolojisi, cilt yüzeyini serinleterek rahatsızlık hissini minimuma indirir. Hassas ciltlerde hafif bir ısı hissi normaldir.

4. Soru: Uygulama sonrası kızarıklık oluştu, ne yapmalıyım?

Cevap: Hafif kızarıklık normaldir ve genellikle birkaç saat içinde kaybolur. Nemlendirici kullanarak cildi yatıştırabilir veya soğuk kompres uygulayabilirsiniz.

5. Soru: Her epilasyondan önce fazla kılları tıraş ediyor musunuz?

Cevap: Her seferinde tıraş olmanıza gerek yok, ancak kullanmadan önce lütfen fazla kılları tıraş edin. İkinci seferden sonra, kıl yaklaşık 5 mm'ye kadar uzarsa, kıl alma etkisi tıraş edilmelidir.

6. Soru: Işınlanmadan sonra bile kıl dökülmesi yok. Neden?

Cevap: Bu ürün kıl büyümesini engelleyen bir üründür. Sonuçları görmek için belirli bir süre sürekli kullanım gerekir. Başlangıçta vücut kıllarının büyümesini engeller, kıl üretimini yavaşlatır. Sürekli kullanımla, atık kıllar büyümeyi durdurur ve kısa sürede atık kıllar daha ince hale gelir.

7. Soru: Birçok kez kullandım ama işe yaramadı.

İşe yaramıyor.

Cevap: Talimatlardaki sayılar sadece bir standarttır. Bu ürünün kullanım etkisi, bireysel yapıya ve kullanım yerine göre değişir. Bunun nedeni, atık kılların renk ve kalınlık olarak farklı olmasıdır. İki aydan fazla kullanıp herhangi bir etki görmezseniz lütfen satın alma mağazasına danışın.

8. Soru: Hangi maruz kalma seviyesi en iyi sonucu verir?

Cevap: Optimum maruz kalma seviyesi kişiden kişiye değişir. Vücudun yapısına bağlı olarak cilt rengi (cilt ne kadar koyuy-

sa, optimum maruz kalma seviyesi o kadar düşük olur) da deęişir. Derece ne kadar yüksekse, ışınlama enerjisi o kadar büyük olur, etki o kadar belirgin olur, döngü o kadar kısalmır, ancak cilt hasarı riski de artar. Önce düşük seviyeden başlayın. Işınlamadan sonra hiç rahatsızlık yoksa veya neredeyse hiç yoksa, bir seviye artırın.

9. Soru: Acı seviyesi nedir?

Cevap: Bir kıl dökücü kullanma sürecinde melanin ışığı emer ve ısı üretir. Sonuç olarak hafif bir acı hissedersiniz. Uygulama yerine ve cilt rengine bağlı olarak acı derecesi deęişir. Lütfen maruz kalma seviyesini uygun duruma göre ayarlayın. Bazen ışınlamadan sonra hafif bir acı hissedilir, ancak 24 saat sonra kaybolur. Anormal cilt durumu oluşursa kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın.

10. Soru: Kılların hangi kısmı tıraş edilmelidir?

Cevap: Lütfen kullanmadan önce koltuk altı, bikini bölgesi, diz altı ve dięer sert kıllarınızı tıraş edin. Tıraş için aşığıdaki iki yöntem önerilir.

- a. Cildi tıraş kremi veya saç kremi ile nemlendirdikten sonra tıraş edin.
- b. Tıraştan önce tıraş bölgesini birkaç dakika sıcak bir havluy-la ısıtın.

11. Soru: Kullanımdan sonra yanık tadı geliyor. Ne yapmalıyım?

Cevap: Bu normal bir olay. Melanin ışığa tepki veriyor ve kullanım sırasında ısı üretiyor. Yani yanık kokusu geliyor. Özellikle kıllar temiz tıraş edilmemişse yanık kokusu almak kolaydır. Ciltte anormallik hissediyorsanız lütfen hemen kullanmayı bırakın.

12. Soru: Tüylerinizi almak için her gün kullanmanız uygun mudur?

Cevap: Gnlk kullanım iin nerilmez. Vcut kıllarının bir byme dngs vardır ve bu rnn ışınlaması byme dneminde kıl kkleri zerinde bir etkiye sahiptir. Bu rn kullanmaya devam ederseniz, kıl bymesini engelleyebilir, kıllar giderek incelir. Talimatlardaki sreye gre kullanmaya devam etmeniz nerilir. İlk ayda her 3 ila 5 gnde bir kullanın. Vcut kıllarınız yavaş uzuyorsa ve etki fark edilirse, kullanım sıklığına kademeli olarak azaltın.

13. Soru: Bir sredir kullanmadıysanız, hangi kullanım sresiyle başlamalısınız?

Cevap: 2 aydan uzun sredir ışınlanmamış paralar tekrar kullanılacaksa, ltfen dngnn ilk ayından başlayın.

14. Soru: Hamileler bu cihazı kullanabilir mi?

Cevap: Hamileler veya emziren anneler bu cihazı kullanmamalıdır.

Sorun Giderme ve Teknik Destek

1. Sorun: Cihaz aılmıyor.

Muhtemel Sebep: G kablosu dzgn baėlanmamış veya prizde sorun olabilir.

zm: G kablosunun doėru baėlandığından ve prizde elektrik olduėundan emin olun.

2. Sorun: Flaş ışığı alışmıyor.

Muhtemel Sebep: Cihazın flaş başlığı ciltle tam temas etmiyor.

zm: Flaş başlığını cilt yzeyine tamamen yerleřtirin ve cihazın uygun modda olduėunu kontrol edin. Ltfen gc aın ve ışık sndėnde ışınlama dėmesine tekrar basın.

3. Sorun: Ciltte tahriř veya kızarıklık olduėu.

Muhtemel Sebep: Yanlış g seviyesi seėimi veya hassas blgelerde ařırı kullanım.

Çözüm: Daha düşük güç seviyelerini kullanın ve tahriş durumunda cildi nemlendirin.

4. Sorun: LED ekranda hata kodu görüntüleniyor.

Muhtemel Sebep: Cihazın dahili sisteminde bir sorun olabilir.

Çözüm: Cihazı kapatıp yeniden başlatın. Sorun devam ederse, teknik servisle iletişime geçin.

5. Sorun: Ekranda hiçbir şey görünmüyor.

Muhtemel Sebep: Güç düğmesine doğru basılmamış olabilir. Güç düğmesine 2 saniyeden uzun süre basılmamış olabilir.

Çözüm: Güç düğmesine sertçe basın. Lütfen 2 saniyeden fazla basılı tutun.

6. Sorun: Otomatik olarak kapanıyor.

Muhtemel Sebep: Ürün 5 dakika süreyle çalıştırılmazsa elektrik beslemesi otomatik olarak kesilecektir.

Çözüm: Lütfen tekrar açmak için güç düğmesini 2 saniyeden uzun süre basılı tutun.

Teknik Destek ve Garanti

- Cihazın garanti süresi boyunca herhangi bir üretim hatası durumunda ücretsiz onarım veya değiştirme sağlanır.
- Destek için lütfen garanti belgesinde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak yetkili servise başvurun.

Geri Dönüşüm



Bu simge, bu ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).

Teknik Bilgiler

Model	FBC977 / Viva
Güç	48W
Flash Ömrü	999.999
Tüp	Quartz Tüp
Buz Noktası Sıcaklığı	-5°C'ye kadar düşebilir.
Ağırlık	348G
Uygulama Alanları	Kol, bacak, yüz, koltuk altı ve bikini bölgesi
Boyutlar	139.6*56.03*202.6mm
Çalışma Voltajı	12V
Çalışma Akımı	4A
Tek Darbe Gücü	9-19J
Dalga Boyu	510-1200nm
Ses Seviyesi	<40dB
Buton Ömrü	>1000000
Çalışma ortamı (sıcaklık/nem)	5°-30° 30%-60%

FABCIO TÜRKİYE DESTEK / YETKİLİ SERVİSLERİ İTHALATÇI FİRMA

Cihazı kullanırken yaşayacağınız tüm sorunlarda destek alabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir yanındaki teknik servis noktaları ile sorunsuz bir müşteri memnuniyeti yaşamınızı hedefliyoruz. Bölgenize en yakın Fabcio destek noktasına başvurarak son teknoloji ürünümüz için destek alabilir, ürününüzü sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Bize ulaşmak için ayrıca aşağıda yer alan telefon numaralarını kullanabilirsiniz.

TNS Bilişim Elekt. San. ve Dış Tic.Ltd.Şti.
Atatürk Mah. Alemdağ Cad. İrfan Sok.No: 8/B
Ümraniye / İstanbul
Çağrı Merkezi: 0850 242 08 73

Üretici Firma:
Shenzhen Lizbella Technology Co., Ltd
Adres : No.1202,C Block, 3rd Building, Huaqiang Creative Industrial Park, Biyan Community, Guangming District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/ EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Fabcio

GARANTİ BELGESİ

Ürün veya İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: TNS Bilişim Elekt. San. ve
Dış. Tic. Ltd. Şti.
Adresi: Atatürk Mah. Alemdağ Cad.
İrfan Sok. No: 8/B Ümraniye/İstanbul
Telefonu: 0850 242 08 73

Malın:

Cinsi: Tüy Alma Cihazı
Markası: Fabcio
Modeli: FBC977 / Viva
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü
Bandrol ve Seri No:

Satıcı Firmanın:

Ünvanı: TNS Bilişim Elekt. San.
ve Dış Tic.Ltd.Şti.
Adresi: Atatürk Mah. Alemdağ Cad.
İrfan Sok.No: 8/B Ümraniye / İstanbul
Telefonu: 0850 242 08 73
E-posta: info@tnspazarlama.com

Fatura Tarihi ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

TNS BİLİŞİM
Elektronik San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Mah. Alemdağ C. Üm. Sok. No: 8- B
Ümraniye-İSTANBUL
Üm. D. No: 3450325872

GARANTİ ŞARTLARI

- 1.** Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz).
- 2.** Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3.** Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a. Sözleşmeden dönme, b. Satış bedelinden indirim isteme, c. Ücretsiz onarılmasını isteme, ç. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir
- 4.** Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5.** Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
·Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
·Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
·Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6.** Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garan-

ti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

Garanti Süresi 2 (iki) Yıldır.

Bakanlıkça Tespit ve İlan Edilen Kullanım Ömrü 5 (Beş) Yıldır.