


# Fabcio

WandUp

Yüz Bakım Cihazı

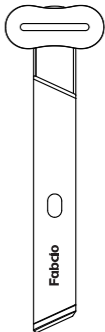

KULLANIM KILAVUZU  
ve GARANTİ BELGESİ

FBC944

CE

# Giriş

Fabcio WandUp dünyasına hoş geldiniz!  
Satın alım tercihiniz için teşekkür ederiz!

## Önemli Bilgiler


Cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatlice okuyun. Kılavuzda verilen talimatlara uyulmaması veya bu kılavuzda belirtilenler dışında kullanılması kendinize zarar vermenize veya ürünün hasar görmesine neden olabilir. Ayrıca, okuduktan sonra, başkalarının kolayca görebileceği bir yerde saklayınız.

## Güvenlik Önlemleri


- Bu ürünü izinsiz sökmeyin ve değiştirmeyin.
- Kılavuz başlığını ters yönde kullanmayın.
- Göz çevresinde kullanırken, normal bir biyolojik mikro - elektrik etkisi olan hafif bir titreme hissi vardır, lütfen endişelenmeyin.
- İnsan vücudunun direnç değerinin sapması nedeniyle, bireyler kullanırken bir elektrik hissiyatı yaşarlar. Lütfen kişinin tolerans seviyesine göre kullanmaya devam edip etmeyeceğinizi kontrol edin. Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz, lütfen hemen kullanmayı bırakın.
- Kullanımdan sonra, lütfen temiz bir bez veya ıslak kâğıt havluyla silin.
- Kullanım sırasında titreşim vb. herhangi bir anormallik bulursanız, lütfen şarj seviyesinin düşük olup olmadığını veya kapalı olup olmadığını kontrol edin.
- Uzun süre kullanılmadığında, lütfen makineyi kapatın ve güneş ışığına maruz kalmaması için kuru bir yerde saklayın.
- Lütfen bu ürünü çocukların erişemeyeceği bir yere koyun. Bu ürün oyuncak olarak kullanılamaz.

## Ürün Tanıtımı

Göz bakımı için özel olarak tasarlanmış Fabcio WandUp güzellik cihazı, titreşim, masaj, sıcak kompres ve mikro akım gibi ileri teknolojileri kullanarak göz çevresine kapsamlı bir bakım sunar. Pozitif iyonlarla derinlemesine temizlik yaparak cilt bakım ürünlerinin besleyici içeriklerinin daha etkili şekilde emilmesine yardımcı olur. Göz çevresini besler, nemlendirir ve yoğun bir bakım sağlar. Aşırı kullanım nedeniyle oluşan uzun süreli göz yorgunluğunu etkili bir şekilde giderir. Aynı zamanda göz çevresindeki yorgunluk belirtilerini hafifleterek daha sağlıklı bir görünüm kazanılmasına destek olur ve şu etkileri sağlar; göz altı morluklarını ve şişkinliklerini azaltır, ince çizgiler ve kaz ayaklarını hafifletir, gerçek kırışıklıkların oluşumunu geciktirir. Düzenli kullanım ile göz çevresini yeniler, aydınlatır ve gözlerinize daha genç ve taze bir görünüm kazandırır.

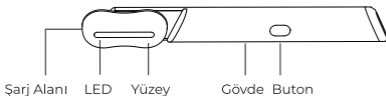

Cihazın üst kısmındaki şarj portu, kapatma durumu içindir. Güç kaynağı yetersiz olduğunda, şarj kablosu şarj portuna bağlanmalıdır.

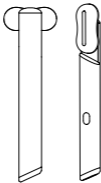

Masaj başlığı 360 derece dönebilir.

## Ürün Fonksiyonları



**Sıcak terapi**, göz yorgunluğunu etkili bir şekilde hafifletir ve kan dolaşımını hızlandırır. Düzenli kullanım, göz altı morlukları, torbalar ve şişkinlik gibi göz problemlerini hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca göz maskesi ve göz kremiyle birlikte kullanıldığında ürünlerin emilimini artırır.



**Optik Güzellik**, Çok işlevli göz güzellik cihazı, 620-630nm dalga boyunda kırmızı ışık ve 465nm dalga boyunda mavi ışık kullanır. Dermis tabakasındaki hücreler kırmızı ışığı emerek hücre ve kolajen sentezini hızlandırır. Bu sayede cilt sıkılaştır, akne izleri ve melanin lekeleri hafifler, cilt daha pürüzsüz ve sağlıklı bir görünüme kavuşur.



**Sonik mikro titreşimler**, göz serumu, göz kremi veya cilt bakım ürünleri uygulandığında, bu ürünleri küçük moleküllere dönüştürerek cildin derinlemesine emilimini sağlar. Bu teknoloji, cilt bakım ürünlerinin etkinliğini artırır.



Çok işlevli göz güzellik cihazının başlığı hem üst hem de ön yüzeyde kullanılabilir. Üst yüzey, göz çevresindeki küçük köşelere odaklanırken, Ön yüzey, daha geniş alanlar için idealdir. Cihazın yenilikçi **360° dönen başlığı**, göz çevresi, dudak çevresi, yüz ve boyun gibi farklı bölgelerle mükemmel uyum sağlar. Bu sayede cihaz, tüm yüz ve boyun cildine kolaylıkla uygulanabilir.

## Nasıl Kullanılır?

Cihazı kullanmadan önce yüzünüzü temizlemeniz önerilir. Bu, yüz yağının kullanım deneyimini olumsuz etkilemesini önler.

Çok işlevli göz güzellik cihazı, elektronik akıllı dokunmatik çip ve akıllı sensör anahtarı kullanır.

• **Kullanım Başlangıcı:** Cihaz, eliniz cihazın gövdesini tuttuğunda ve başlık cildinize temas ettiğinde otomatik olarak çalışmaya başlar.

• **Kullanım Sonu:** Ciltle temas kesildiğinde cihaz otomatik olarak durur.

Cihaz, **biyo-mikro elektrik, optik cilt bakımı ve sonik titreşim** özelliklerini eş zamanlı olarak devreye sokar ve yine eş zamanlı olarak durdurur.

### Önemli Notlar:

• Kullanımdan önce cihazı elinizde denemeniz ve rahatsızlık hissetmezseniz göz çevresinde kullanmanız önerilir.

• Göz çevresinde kullanırken, gözlerin açık veya kapalı olmasına bağlı olarak hafif bir ışık yanıp sönme hissi yaşanabilir. Bu durum, biyolojik mikro elektrik fonksiyonunun bir sonucu olup tamamen normaldir.

### Uygulama Alanları:

Göz çevresinin yanı sıra cihaz, yüz ve boyun bölgelerinde de kullanılabilir.

- Düzenli kullanım, göz çevresindeki ince çizgiler, koyu halkalar, göz torbaları, nazolabial (gülme) çizgiler ve boyun çizgileri gibi cilt problemlerini etkili bir şekilde hafifletmeye yardımcı olur.
- Cildinizi sıkılaştırır ve pürüzsüz bir görünüm sağlar.

### Kullanım Yöntemi:

Cihazı farklı yüz bölgelerine uygularken, bölgenin şekline göre uygun açıyı kullanabilirsiniz. **Aşağıdan yukarıya doğru** bir hareketle uygulama yapmak, cildi toparlama ve kaldırma etkisi için tavsiye edilir.

Aşağıdaki görsel, cihazın kullanım yöntemini detaylı olarak göstermektedir.



## Teknik Özellikler

Model	FBC944 / WandUp
Güç	1.5W
Batarya	350mAh
Ağırlık	45G
Şarj Voltajı	5V—0.5A
Ölçüler	180*10*18mm

## Temizlik ve Bakım

1. Kullanım sonrası tüm yüzeyleri nemli bir bezle silin ve iyi muhafaza edin.
2. Sert veya aşındırıcı temizleyiciler veya çözücüler kullanmayınız.
3. Temizledikten sonra güvenli, kuru ve tozsuz bir yerde saklayınız.

## Geri Dönüşüm



Bu simge, bu ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).

# **Fabcio Türkiye Destek / Yetkili Servisleri İthalatçı Firma**

Cihazı kullanırken yaşayacağınız tüm sorunlarda destek alabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir yanındaki teknik servis noktaları ile sorunsuz bir müşteri memnuniyeti yaşamınızı hedefliyoruz. Bölgenize en yakın Fabcio destek noktasına başvurarak son teknoloji ürünümüz için destek alabilir, ürününüzü sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Bize ulaşmak için ayrıca aşağıda yer alan telefon numaralarını kullanabilirsiniz.

TNS Bilişim Elekt. San. ve Dış Tic.Ltd.Şti.  
Atatürk Mah. Alemdağ Cad. İrfan Sok.No: 8/B  
Ümraniye / İstanbul  
Çağrı Merkezi: 0850 242 08 73

Üretici Firma:

Shenzhen Mesky Technology Co., Ltd  
Adres : B705,No.16, Central Road, Wanfeng Community,  
XinQiao Street, BaoAn District, Shenzhen City, GuangDong  
Province, China, 518104

**Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği)**

**ve 2014/35/ EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği )**

**sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.**



# Fabcio

## GARANTİ BELGESİ

### Ürün veya İthalatçı Firmasının:

Ünvanı: TNS Bilişim Elekt. San. ve  
Dış. Tic. Ltd. Şti.  
Adresi: Atatürk Mah. Alemdağ Cad.  
İrfan Sok. No: 8/B Ümraniye/İstanbul  
Telefonu: 0850 242 08 73

### Malın:

Cinsi: Yüz Bakım Cihazı  
Markası: Fabcio  
Modeli: FBC944 / WandUp  
Garanti Süresi: 2 Yıl  
Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü  
Bandrol ve Seri No:

### Satıcı Firmasının:

Ünvanı: TNS Bilişim Elekt. San.  
ve Dış Tic.Ltd.Şti.  
Adresi: Atatürk Mah. Alemdağ Cad.  
İrfan Sok.No: 8/B Ümraniye / İstanbul  
Telefonu: 0850 242 08 73  
E-posta: info@tnspazarlama.com

Fatura Tarihi ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

**TNS BİLİŞİM**  
Elektronik San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.  
Atatürk Mah. Alemdağ C. İrfan Sok. No: 8-B  
Ümraniye - İSTANBUL  
Ümraniye V.D. No: 450325872

## Garanti Şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz).
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a. Sözleşmeden dönme, b. Satış bedelinden indirim isteme, c. Ücretsiz onarılmasını isteme, ç. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre,

garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

## **AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.**

**Garanti Süresi 2 (iki) Yıldır.**

**Bakanlıkça Tespit ve İlan Edilen Kullanım Ömrü 5 (Beş) Yıldır.**