


**Fabcio**<sup>®</sup>  
MySmile

Şarj Edilebilir UV Diş Fırçası  
Başlık Sterilizasyon Cihazı

KULLANIM KILAVUZU  
ve GARANTİ BELGESİ

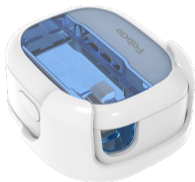

FBC376

CE

## Giriş

Satın alma tercihiniz için teşekkür ederiz,  
Fabcio markasına hoşgeldiniz!

## Önemli Bilgiler

Ürünleri hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın. Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Talimatlara her zaman uyun. Ürününüzü herhangi bir şekilde demonte etmeyiniz. Herhangi bir kusur olup olmadığını görmek için paketleri çıkardıktan sonra bileşenleri kontrol edin. Ürünü buhardan uzak tutunuz. Fırın, indüksiyonlu ocak veya bazı aşırı ısınmış eşyaların zarar görmemesi için mikrodalgaya veya yüksek basınçlı cihazlara koymayın. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve arıza garanti kapsamı dışında işlem görür. Cihazınız evde kullanılması için üretilmiştir.

## Ürün Açıklaması ve Kutu İçeriği

Diş fırçasının başlıklarında bulunan bakterilerin %99,9'unu sadece 3 dakikada temizlediği klinik olarak kanıtlanmıştır.

- UV Diş Fırçası Başlık Sterilizasyon Cihazı x1
- Duvara Sabitleme Aparatı x1
- Şarj Kablosu x1
- Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi x1

## Teknik Bilgiler

Model	MySmile / FBC376
Voltaj	5V
Güç Tüketimi	0.2W
UV Lamba Ömrü	≥ 5000 Saat
Ağırlık	33.5g
UV Radyasyonu	≥ 1000 µW/cm <sup>2</sup>
Ölçüler	60*52*25mm
Çalışma Ortam Sıcaklığı	5-40 °C
Renk	Beyaz
Uyumluluk	Evrensel (Yuvarlak Tip Başlık Hariç)

**Dikkat:** Diş fırçasının veya diş fırçası başlığının kılırları sterilizatöre yerleştirildiğinde hafif nemli olabilir, ancak asla sıvılaşma ıslak olmamalıdır.

**Dikkat:** UV sterilizatörünü yalnızca diş fırçası veya diş fırçası başlığı aşağı bakacak şekilde kullanın.

**Dikkat:** Diş fırçasını veya diş fırçası başlığını UV sterilizatörün içinde taşırken kılırların tamamen kuru olması gerekir.

## Genel Kullanım Talimatları

1. UV sterilizatörünün kapağını açmak için düğmeyi kullanın.
2. Diş fırçası başlığını UV sterilizatörüne yerleştirin. Fırça kılları UV lambasına bakmalıdır.
3. Kapağı kapatın. Sterilizasyon otomatik olarak başlayacaktır.
4. Sterilizasyon 3 dakika sürer. Sterilizasyon işlemi sırasında kapağı açmayınız.
5. UV ışığı söndükten sonra kapağı açıp diş fırçanızı veya fırça başlığınızı çıkarabilirsiniz.

## Önemli Güvenlik Önlemleri

1. Yanlış kullanımdan kaynaklanan yaralanmaları önlemek için lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve kullanım kılavuzunda belirtilen kullanım şekline uygun olarak kullanınız.
2. Bu ürün çocuklardan uzak tutulmalıdır. Çocukların veya deneyimsiz kişilerin bu ürünü gözetimsiz bir şekilde çalıştırmalarına izin vermeyin.
3. Asla suya batırmayın, bu durum üniteye zarar verir.
4. Ürünün hiçbir parçasını bulaşık makinesinde yıkamayınız.
5. Mikrodalga kullanımına uygun değildir. Mikrodalgaya koymayın.
6. Yanıcı maddelerin yanına YERLEŞTİRMEYİN ve/veya ürünü nemli ortamlarda KULLANMAYIN.
7. Hasarlı bir kablo veya arızalandıktan veya herhangi bir şekilde hasar gördükten sonra

çalıştırmayın. Muayene, oranım veya elektriksel veya mekaniksel ayar için Fabcio ile iletişime geçin. Ürünü SÖKMEYİN veya parçaları Fabcio MySmile ürünü için tasarlanmamış parçalarla DEĞİŞTİRMEYİN.

8. Tüm servis işlemleri yetkili servis temsilcileri tarafından yapılmalıdır.

9. Fabcio tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması yaralanmalara sebebiyet verebilir.

## Nasıl Şarj Edilir?

UV sterilizatörünün şarj edilmesi gerekiyorsa, içindeki mavi ışık 10 kez yanıp söner. UV sterilizatörünü birlikte verilen güç kablosunu kullanarak şarj edebilirsiniz.

1. UV sterilizatörünü güç kablosuna bağlayın.
2. AC adaptörünün diğer ucunu adaptöre takın ve bir güç kaynağına bağlayın. Şarj sırasında mavi gösterge ışığı yanıp sönecektir.
3. UV sterilizatörü yaklaşık 3 saat sonra tamamen şarj olacaktır. Şarj işlemi tamamlandığında mavi ışık otomatik olarak kapanacaktır.

**Not:** UV sterilizatörünün şarjı tamamen boşaldığında, en azından minimum şarj olana kadar LED yanmayabilir.

**Not:** Paket içeriğinde adaptör bulunmamaktadır.



Cihazın üzerine herhangi bir Őey koymayın. Herhangi bir bileŐen veya aksesuarı yaĒ veya herhangi bir sıvı ile doldurmayın.

## **Cihazın Temizlenmesi**

Suya daldırmayın, yumuŐak nemli bir bezle hafifŐe silerek temizleyin.

## **Ürünün İŐini AŐmayın**

İŐerisinde, kullanıcının servisini yapabileceĒi hiçbir parŐa yoktur. GüŐ KAPALI olsa bile veya cihaz düzgün Őekilde ŐalıŐmıyorsa, Fabcio ile irtibata geŐin.

## **Periyodik Bakım**

Ürününüz periyodik bakım gerektirmez. Herhangi bir sorunda yetkili servise baŐvurun.

## FABCIO TÜRKİYE DESTEK / YETKİLİ SERVİSLERİ / İTHALATÇI FİRMA

Cihazı kullanırken yaşayacağınız tüm sorunlarda destek alabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir yanındaki teknik servis noktaları ile sorunsuz bir müşteri memnuniyeti yaşamamızı hedefliyoruz. Bölgenize en yakın Fabcio destek noktasına başvurarak son teknoloji ürünümüz için destek alabilir, ürününüzü sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Bize ulaşmak için ayrıca aşağıda yer alan telefon numaralarını kullanabilirsiniz.

TNS Bilişim Elekt. San. ve Dış Tic.Ltd.Şti.  
Atatürk Mah. Alemdağ Cad. İrfan Sok.No: 8/B Ümraniye  
İstanbul Çağrı Merkezi : 0850 242 08 73

Üretici Firma: Ningbo Seago Electric Co., Ltd  
Adres: No.118, Dongfa Road, Cixi Binhai Economic  
Development Zone, Ningbo, China 315311  
Tel : +86 574 58989911

**Bu ürün 2014/30/ EU (Elektromanyetik Uyumluluk  
Yönetmeliği) ve 2014/35/ EU (Alçak Gerilim (LVD)  
yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.**

# GARANTİ BELGESİ

## İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA

**ÜNVANI:** TNS Bilişim Elekt. San. ve Dış Tic.Ltd.Şti.  
**ADRESİ:** Atatürk Mah. Alemdağ Cad. İrfan Sok.No: 8/B  
Ümraniye  
**TEL :** 0850 242 08 73

## FİRMA YETKİLİSİNİN İMZA VE KAŞESİ:



**MALIN CİNSİ** : UV Dış Fırçası Başlık  
Sterilizasyon Cihazı  
**MARKASI** : Fabcio  
**MODEL** : FBC376 / MySmile  
**GARANTİ SÜRESİ** : 2 (İKİ) YIL  
**AZAMİ TAMİR SÜRESİ** : 20 (YİRMİ)İŞ GÜNÜ  
**BANDROL VE SERİ NO** :

## GARANTİ ŞARTLARI

- 1.Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz).
- 2.Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;  
a. Sözleşmeden dönme, b. Satış bedelinden indirim isteme, c. Ücretsiz onarılmasını isteme, ç. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir
- 4.Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5.Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;  
•Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,  
•Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin

## GARANTİ ŞARTLARI

yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6.Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8.Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9.Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

**Garanti Süresi 2 (iki) Yıldır.**